

**NEW**  
series

OSHIMA MEDICAL INDUSTRIES CO., LTD.

**EMC適合**

Electro Magnetic Compatibility

ベッド型マッサージ器：オスピナレーター R-303 WAVE-II

# WAVE II

OSPINALATOR R-303

ウェーブ-II



## ハイ・クォリティー & ロー・プライス

体形にあわせて変化するローラーシステムで理想的な上半身の擦法治療（体形ガイド擦法）。「強もみ」派から高齢者や女性に人気の「ソフトタッチ」派まで、幅広いニーズにこたえる治療強度の設定。下肢治療では三叉足ローラーまたは、パイプ（振動）の2機種を用意。ハイ・クォリティー&ロー・プライスのベッド型マッサージ器。

## Color variation

患者さんが仰臥する天板は青が標準色。他にグリーン、ピンクをオプションで用意しました。（オプション色はご発注から約3週間を要します。）



# WAVE II

High quality  
& Low price

## Ospinalator R-303 WAVE-II

### 使い勝手を心得た操作性

治療内容の設定、治療残時間表示や治療強度表示など、使い勝手と見やすさを心得た操作パネルです。




バイブ機能搭載機の操作パネルです。


## Ospinalator R-303 WAVE-II

### 体形にあわせて変化する ローラーシステム

独特なカーブを描く頸部から腰部の人体ライン。ローラーシステムはこのラインを適切にトレースしますので、「痛みなく、刺激バランスのよい。」理想的な擦法治療を実現しました。  
(体形ガイド擦法)

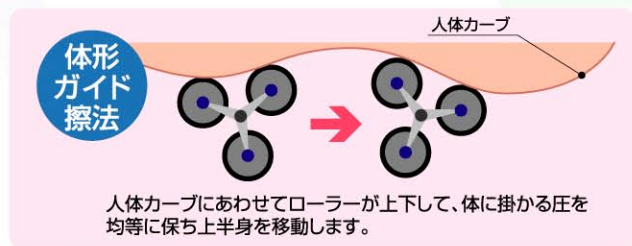

人体カーブにあわせてローラーが上下して、体に掛かる圧を均等に保ち上半身を移動します。

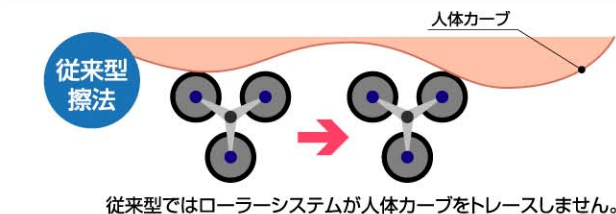

従来型ではローラーシステムが人体カーブをトレースしません。



オスピナレーターR-303

<http://www.ooshima.me>



安全に関するご注意

- ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 定期的に機器の点検を行ってください。

※仕様及び寸法等は変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

## Ospinalator R-303 WAVE-II

### 「強もみ」派も、「ソフトもみ」派も 幅広いニーズにこたえます

「強もみ」を好む患者さんも、「ソフトもみ」のご高齢者や女性でも、幅広いニーズにこたえる治療強度の設定ができます。  
(強弱の調整幅は従来器の80%UP)

## Ospinalator R-303 WAVE-II

### 三叉足ローラーまたは、 バイブが選べる下肢治療

下肢治療では三叉足ローラーまたは、バイブの2機種を用意。  
発注時にお選びいただけます。(バイブ機では発注後約3週間を要します。)

## Ospinalator R-303 WAVE-II

### 充実した基本機能

- ① 頸部マッサージ(上半身)
  - ② 遠心性マッサージ(上半身)
  - ③ 求心性マッサージ(上半身)
  - ④ 体形ガイド擦法(上半身)
  - ⑤ バイブレーション(下肢)
  - ⑥ 三叉足ローラー(下肢)
- 発注時にお選びいただけます。

## Ospinalator R-303 WAVE-II

定格電圧	AC100V 50/60Hz
電源入力	400VA(ヒーター入) 300VA(ヒーター切)
電撃の保護形式	クラスI機器
電撃の保護程度	B型
外形寸法・本体重量	2110(W)×720(D)×540(H)mm・115kg
承認番号	22000BZX00958000
JMDNコード	34488000
医療機器の分類	管理医療機器(クラスII) 特定保守管理医療機器
電磁両立性(EMC)	IEC60601-1-2:2001適合

■製造販売元

理学療法機器



株式会社 大島製作所

本社 〒132-0031 東京都江戸川区松島1-21-7 ☎03(3654)7205  
 関西営業所 〒578-0965 東大阪市本庄西3-7-38 ☎06(6744)0348  
 名古屋営業所 〒451-0054 名古屋市中区南堀越1-18-15 ☎052(521)2310  
 福岡営業所 〒812-0881 福岡市博多区井相田2-2-5 ☎092(592)3191